

## Gebrauchsanweisung

# BLUp<sup>an</sup><sup>®</sup> soft UD

Augentropfen mit Natriumhyaluronat 0,15 %

## BESCHREIBUNG

**BLUp<sup>an</sup><sup>®</sup> soft UD** bilden einen sterilen, konservierungsmittelfreien, viskoelastischen, klaren Schutzfilm für die Hornhaut.

**BLUp<sup>an</sup><sup>®</sup> soft UD** enthalten Natriumhyaluronat, das Natriumsalz der Hyaluronsäure, das aufgrund seiner besonderen physikalischen Eigenschaft einen gleichmäßigen, stabilen und besonders lang haftenden Schutzfilm auf der Hornhaut bildet, ohne die Sehleistung zu beeinträchtigen.


Dadurch bewirken **BLUp<sup>an</sup><sup>®</sup> soft UD** lang anhaltende Linderung bei Beschwerden in Zusammenhang mit

- mechanischer Beanspruchung, z. B. beim Tragen harter oder weicher Kontaktlinsen oder bei diagnostischen Eingriffen am Auge,
- Umweltstress, z. B. durch Klimaanlage, Wind, Kälte, Trockenheit oder Luftverschmutzung beispielsweise durch Zigarettenrauch, oder
- bei strapazierten Augen, z. B. bei der Arbeit an Computerbildschirmen, Mikroskopen sowie bei langen Autofahrten.

Aufgrund ihrer Konservierungsmittelfreiheit sind **BLUp<sup>an</sup><sup>®</sup> soft UD** auch bei längerfristiger Anwendung besonders gut verträglich. **BLUp<sup>an</sup><sup>®</sup> soft UD** sind auch für Kontaktlinsenträger geeignet.

## ANWENDUNG

Trennen Sie ein Ein-Dosis-Behältnis ab. Vergewissern Sie sich, dass jedes Ein-Dosis-Behältnis unbeschädigt ist. Zum Öffnen drehen Sie das flache Ende des Ein-Dosis-Behältnisses ab (nicht ziehen). Legen Sie den Kopf etwas zurück, sehen Sie nach oben und ziehen Sie das Unterlid leicht vom Auge ab und geben Sie 3-5 mal täglich einen Tropfen in den Bindehautsack des Auges. Schließen Sie langsam die Augen, damit sich die Flüssigkeit gleichmäßig auf der Oberfläche des Auges verteilen kann. Wenn sich die Beschwerden verschlimmern sollten oder keine Besserung eintritt, suchen Sie Ihren Augenarzt auf.

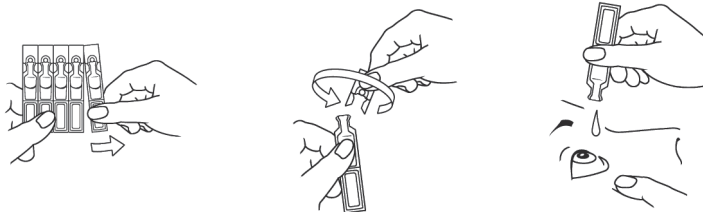

## ZUSAMMENSETZUNG

1 enthält: Natriumhyaluronat 0,15 %, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Citronensäure, Wasser für Injektionszwecke.

## PACKUNGSGRÖSSEN

Verkaufseinheiten:

Ein-Dosis-Behältnisse, 10 x 0,35 ml / 20 x 0,35 ml / 40 x 0,35 ml / 60 x 0,35 ml

## VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNHINWEISE

- Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.
- Das Auge mit dem Ein-Dosis-Behältnis nicht berühren.
- Nicht anwenden bei einer bestehenden Überempfindlichkeit gegenüber einem der Inhaltsstoffe.
- Nur zur einmaligen Anwendung bestimmt; da **BLUpa<sub>n</sub>® soft UD** keine Konservierungsmittel enthalten, dürfen Reste der Lösung nicht mehr verwendet werden.
- Falls Sie zusätzlich andere Augentropfen/Augensalben anwenden, sollte ein Anwendungsabstand von 15 Minuten eingehalten werden. **BLUpa<sub>n</sub>® soft UD** sollten dann immer zuletzt verabreicht werden.
- Nicht an infizierten oder verletzten Augen anwenden.
- Nach der Anwendung kann vorübergehend die Sehschärfe verringert sein; in diesem Fall kein Fahrzeug lenken, keine Maschinen bedienen und warten, bis die normale Sehschärfe wieder eingetreten ist.
- Verwenden Sie die Augentropfen nicht nach Ablauf des Verfallsdatums. Dieses finden Sie auf jedem Ein-Dosis-Behältnis sowie auf der Faltschachtel eingeprägt.

## LAGERUNG

Bei 2° C bis 25° C lagern. Vor Frost schützen. Ein-Dosis-Behältnisse vor Licht geschützt im Originalkarton aufbewahren.

 Chargen-Nummer und  „verwendbar bis“ sind auf dem Ein-Dosis-Behältnis eingeprägt.

 aseptische Herstellung.

 nur zum Einmalgebrauch.

 Beschreibung und Art der Anwendung siehe beigefügte Gebrauchsanweisung.

 Lagerungstemperatur.

 Nicht verwenden bei beschädigtem Ein-Dosis-Behältnis.



### Hersteller:

Penta Arzneimittel GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulln  
Deutschland

### Vertrieb in Deutschland:

Pharma Stulln GmbH  
Werksstraße 3  
92551 Stulln  
Deutschland

 0483

STAND DER INFORMATION: 02/2016

*pharma* **STULLN**

**Bitte beachten!**

Diese Daten dienen nur zur Abstimmung des Layouts. Farben sind im Ausdruck nicht farbverbindlich! Ebenso obliegt die Verantwortung für die Richtigkeit der Code (EAN/PZN, Laetuscode, Sichtmarken, produktionsinterne Nummern etc.) nicht dem druckhaus Weber, eine finale technische Prüfung muß vom Kunden durchgeführt werden.

|                             |                            |                                |
|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Name:</b> BLUpan Soft UD | <b>Land:</b> DE            | <b>Korrekturverlauf:</b>       |
| <b>Objekt:</b> Beileger     | <b>Version:</b> 22.0412.01 | 1. Korr.: 24.06.16 Fr. Hofmann |
| <b>Maße:</b> 135 x 210      | <b>Laetus:</b> 54          | 2. Korr.:                      |
| <b>PMR-Nr:</b>              | <b>Ptgröße:</b> --         | 3. Korr.:                      |
| <b>Farben:</b> Schwarz      |                            | 4. Korr.:                      |